


DATEN- BLATT




CR-7000

**BÖRDEL- UND ENTBÖRDELSTATION SPEZIAL NEST
ZUR STERILEN PHARMAZEUTISCHEN VERPACKUNG**

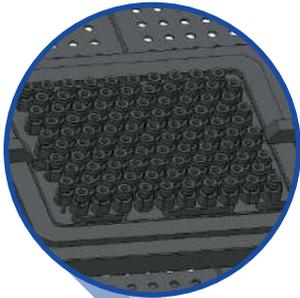

Direktes Bördeln
mit unterschiedlichen
NEST-Formaten

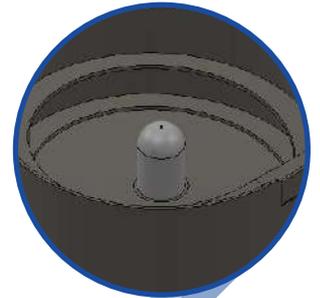

Kompakte Rüttelschale zur
Beförderung Ihrer unter-
schiedlichen Kappen

EIGENSCHAFTEN:

Die neue aseptische Bördelmaschine wurde speziell im Hinblick auf die pharmazeutischen Normen für die sterile Verpackung von Pulvern und Flüssigkeiten entwickelt und konzipiert.

Dank unserem Know-how und unserer Erfahrung konnten wir den kompaktesten und funktionsstärksten Automaten auf dem Markt entwickeln.

Das Prinzip ermöglicht es, jede auf dem Markt erhältliche Art und jedes Format von „Nest“ auf einen indizierten Plattenkreuztisch einzusetzen, um die unterschiedlichen Fläschchenformate dann mit Hilfe unseres universellen und patentierten Bördelprinzips wiederholbar und kontrolliert zu verbördeln.

Eine universelle Rüttelschale mit kompakter Bauweise versorgt den Automaten mittels einer Schiene mit Kappen: Eine einzige Schale kann verschiedene Kappentypen befördern (Beispiel: 13 mm Flip-off und 20 mm Flip-off mit derselben Schale).

Mittels eines Touchscreens kann der Bediener ein vorgegebenes Programm wählen und die automatische Verbördelung mit kontrollierter Kraft starten. Die Montage der „Nester“ erfolgt ganz einfach per Direktzugriff auf die Vorderseite des Automaten. Die Arbeitsoberfläche ist durch einen Laserscanner geschützt, der trotzdem Zugriff zur Rüttelschale zur Bestückung der Kappen zulässt.

VORTEILE:

- Ihr Automat nach Maß: Je nach Isolator oder Arbeitszone bündige Integration in die Arbeitsoberfläche.
- Kompakt und leistungsstark
- Geringe Partikelemission
- Bördelkopf mit Spezialbeschichtung für den pharmazeutischen Bereich und Gebrauch im Reinraum
- Universelle Rüttelschale, abnehmbar und kompakt
- Für jedes Flaschenformat im Nest
- Gesichert durch einen Laserscanner
- Bedienbar über externen Touchscreen
- Netzstromfunktion

BESCHREIBUNG	KAT.-NR.
Elektrische Bördelstation Modell Crimptronic CR-7000 (Komplette Station ohne Bördelkopf)	CR-7000



Einstellbare Kraft je nach Art der Kappen und Dichtungen



Maximaler Schutz dank Laserscanner



Eine einfache Stromzufuhr von 230 V/50 Hz reicht aus




Durchschnittsfrequenz Fläschchen / Stunde



Bördeln für Fläschchen in Nestern



Die Maße werden speziell an die Größe Ihres Isolators unter laminarer Strömung angepasst

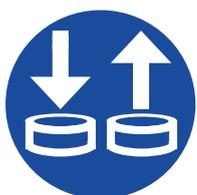

Zum Bördeln und Entbördeln



Universelle und kompakte Rüttelschale
1 Schale kann verschiedene Kappentypen befördern Beispiel: 13 mm Flip-off und 20 mm Flip-off mit derselben Schale



Steuerung über Touchscreen
Intuitives und benutzerfreundliches Programm
Schneller Formatwechsel
Individuelle Programmeinstellung



Hergestellt in Frankreich



Maschine 10 Jahre lang reparabel



Bericht und Protokoll über Installationsqualifikation (IQ) & Betriebsqualifikation (BQ)



Zögern Sie nicht, sich für genauere Auskünfte an uns zu wenden



***Anmerkung:** Zubehör | Sicherheitsabdeckungen für Bördel-/Entbördelköpfe
Der Gebrauch oder Nichtgebrauch einer Abdeckung hat keinen Einfluss auf die Qualität der Verbördelung. Die Abdeckung ermöglicht Ihnen aber den absolut sicheren Gebrauch sowie eine optimale Führung für die Kappe.